



**NIEUW**

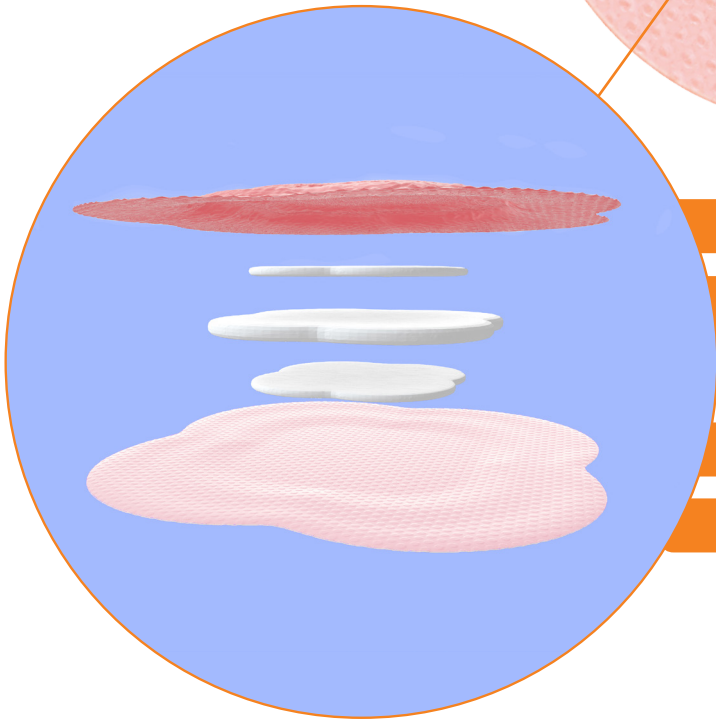

- Ademende topfilm
- Afschermingslaag
- Hyper-absorberende kern
- Hydrocellulaire foamlaag
- Siliconengel kleeflaag

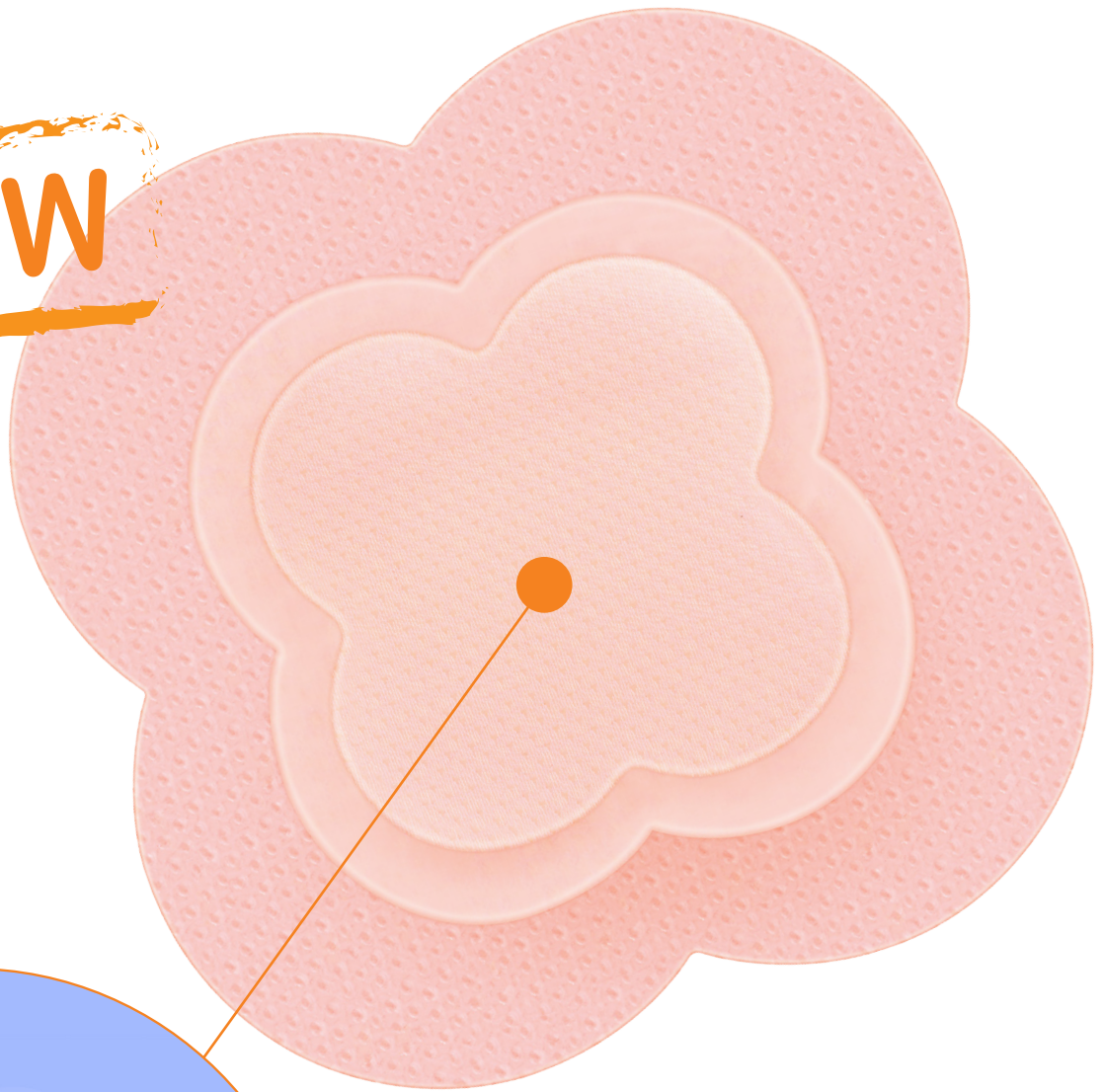

**smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE**

Designed for people.  
Designed for life.

# ALLEVYN® Life is een meerlaags kompres, speciaal ontworpen voor mensen en hun alledaagse activiteiten en bevat o.a. een hydrocellulaire foamlag, hyper-absorberende kern en afschermingslaag met de volgende kenmerken:



- Unieke vierlobbige vorm met een brede rand die de contouren van het menselijk lichaam perfect volgt en douchen voor de patiënt mogelijk maakt<sup>1-3</sup>
- De afschermingslaag minimaliseert de visuele impact van exsudaat<sup>4</sup> waardoor de patiënt erop kan vertrouwen dat het kompres geen negatieve aandacht van anderen trekt.
- Uitstekend vasthouden van vocht onder druk<sup>5</sup>
- Biedt lekkagepreventie, een geruststellende gedachte voor de patiënt<sup>5</sup>
- Absorptie van wondgeur aangetoond bij testen (*in vitro*) op representatieve geurelementen<sup>6</sup>
- Het meerlaagse ontwerp van ALLEVYN Life biedt een kusseneffect en helpt om druk te verspreiden<sup>7</sup>
- De siliconen wondcontactlaag biedt minimale pijn en ongemak tijdens het verwijderen en laat herpositionering toe<sup>9</sup>
- Handige vervangingsindicator voorkomt onnodig vervangen van het kompres en verspilling

## Indicaties

Wondverzorging bij secundaire genezing van oppervlakkige en granulerende wonden, chronische en acute exsuderende wonden, matig tot diepe wonden zoals decubitus, ulcus cruris, diabetische beenulcera, geïnfecteerde wonden, oncologische wonden, operatiewonden, eerste- en tweedegraads brandwonden, donorplaatsen, skin-tears, schimmelende ulcera.

## Gebruiksaanwijzing

Reinig de wond volgens de normale procedures. Selecteer een kompres van de juiste afmeting. Prepareer en reinig de huid rondom de wond door overtollig vocht te verwijderen. Overmatig haar dient te worden afgeknipt om te zorgen dat het kompres zo dicht mogelijk op de wond kan worden aangebracht. Verwijder één vel bescherm papier van ALLEVYN Life en plaats het kompres met de klevende zijde op de huid. Wrijf het kompres vlak over de wond om te zorgen dat er geen vouwen in zitten. Verwijder het resterende bescherm papier en breng het kompres aan over de rest van de wond zonder het uit te rekken. Het gehele oppervlak van de wond dient volledig bedekt te zijn met het wondkussen van het kompres. ALLEVYN Life kan worden gebruikt om moeilijk te verbinden wonden zoals op hielen en ellebogen te behandelen. De hoekpunten van het kompres mogen overlappen bij het plaatsen, maar zorg ervoor dat het kompres niet gevouwen of uitgerekt wordt.

## Frequentie van verbandwisseling

Tijdens de eerste stadia van de wondgenezing dienen ALLEVYN Life kompressen regelmatig te worden geïnspecteerd. Als het product wordt gebruikt op geïnfecteerde wonden, dient de infectie te worden onderzocht en behandeld volgens het plaatselijk klinisch protocol. Het kompres kan maximaal 7 dagen worden gebruikt, behalve in het sacrale gebied, waar het kompres maximaal 5 dagen gebruikt kan worden. Dit is afhankelijk van de conditie van de wond en de nabijgelegen huid, of totdat het exsudaat meer dan 50% van het absorberende foam buiten de centrale afschermingslaag bereikt.

Vanwege vergroot risico op contaminatie en infectie in het sacrale gebied kunnen lokale protocollen meer controle van de kleefkracht van het kompres voorschrijven. Het bovenstaande is een richtlijn; de beslissing wanneer u het kompres verwisselt, dient te worden genomen op basis van een klinische beoordeling. Plaatselijke protocollen dienen ook in overweging te worden genomen.

## Verwijderen van het kompres

Om het ALLEVYN Life kompres te verwijderen, tilt u een hoekpunt op en trekt u het kompres voorzichtig los totdat het volledig van de wond verwijderd is. Sacrale kompressen dienen van bovenaf richting de anus verwijderd te worden om het risico op infectieoverdracht te minimaliseren.

## Contra-indicaties / voorzorgsmaatregelen

Gebruik ALLEVYN Life niet met oxiderende stoffen zoals hypochlorietoplossingen (bv. EUSOL) of waterstofperoxide, aangezien deze de absorberende polyurethaan componenten van het kompres kunnen afbreken.

Stop met het gebruik als roodheid of gevoeligheid optreedt.

Niet in het kompres knippen, hierdoor kunnen interne delen van het kompres in de wond komen waardoor het genezingsproces kan worden vertraagd. De bacteriële eigenschappen van het kompres worden hierdoor ook aangetast, waardoor infectie kan ontstaan.

ALLEVYN Life dient niet als enig middel te worden gebruikt voor drukverlichting, maar dient altijd samen met andere drukverlichtingsmiddelen te worden gebruikt.

ALLEVYN Life is een product voor eenmalig gebruik. Bij gebruik op meer dan één patiënt kan kruisbesmetting of infectie optreden. Door de verpakking te openen, wordt de steriele barrière verbroken. Daarom dient u geen geopend kompres te bewaren voor gebruik op een later tijdstip.

**Geen wondvocht langs de rand,**  
kompres kan blijven zitten, wondvocht wordt gemaskeerd

**Wondvocht raakt 50% van de rand,**  
kompres dient vervangen te worden

Het bovengenoemde is een richtlijn. De beslissing wanneer het kompres vervangen dient te worden is afhankelijk van de klinische beoordeling. Er dient ook rekening gehouden te worden met lokale protocollen.

## ALLEVYN Life

Artikelnummer	Afmeting	Verpakking	ZI-nummer
66801067	10.3 cm x 10.3 cm (93 cm <sup>2</sup> )	10	15942619
66801068	12.9 cm x 12.9 cm (146 cm <sup>2</sup> )	10	15942627
66801069	15.4 cm x 15.4 cm (211 cm <sup>2</sup> )	10	15942635
66801070	21 cm x 21 cm (392 cm <sup>2</sup> )	10	15942643
66801304	Heel 25 cm x 25.2 cm	5	15942686
66801306	Sacrum 17.2 cm x 17.5 cm (235 cm <sup>2</sup> )	10	15942651
66801307	Sacrum 21.6 cm x 23 cm (386 cm <sup>2</sup> )	10	15942678



## Referenties

1. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex™ Border.
2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 021 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Biatain™ Silicone.
3. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010.
4. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
5. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
6. Data on File Report DS/12/127/DOF, June 2012. Roberts Sarah. Odour reducing properties of ALLEVYN Life.
7. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone.
8. Hurd, T et al, A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border, Wounds UK, 2009, Vol5, No 3.
9. Smith & Nephew report HVT 050, Results from an open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S and Smith G. November 2008.

For patients. For budgets. For today.®

Wondverzorging  
Smith & Nephew B.V.  
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp  
T 020-654 39 99  
F 020-654 39 38  
info.wond@smith-nephew.com

www.smith-nephew.nl/wound  
\* Handelsmerk van Smith & Nephew  
™ Alle handelsmerken erkend  
M-NL-NL-10-13-286